



MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 23086 Aparat masaj pentru ochi
Insportline Mikaella




CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3
DESCRIERE PRODUS	3
UTILIZARE	4
MENTENANTA.....	4
ALIMENTARE.....	4
SPECIFICATII.....	5
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.....	5

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Cititi manualul inainte de utilizare si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
- Scoateti toate obiectele metalice si bijuteriile de pe corp inainte de utilizare.
- Nu reparati sau modificati produsul daca dispozitivul nu functioneaza corect, contactati departamentul de service. Nu este potrivit pentru persoanele sensibile la caldura, alergii la metale sau piele hipersensibila.
- Nu este potrivit pentru: femei gravide; copii; persoanele care sufera de epilepsie, tumori, inflamatii; persoanele care folosesc un stimulator cardiac; persoane sensibile la caldura, vibratii; persoanele care sufera de eczeme sau boli dermatologice. Contactati medicul dumneavoastra pentru mai multe informatii.


DESCRIERE PRODUS

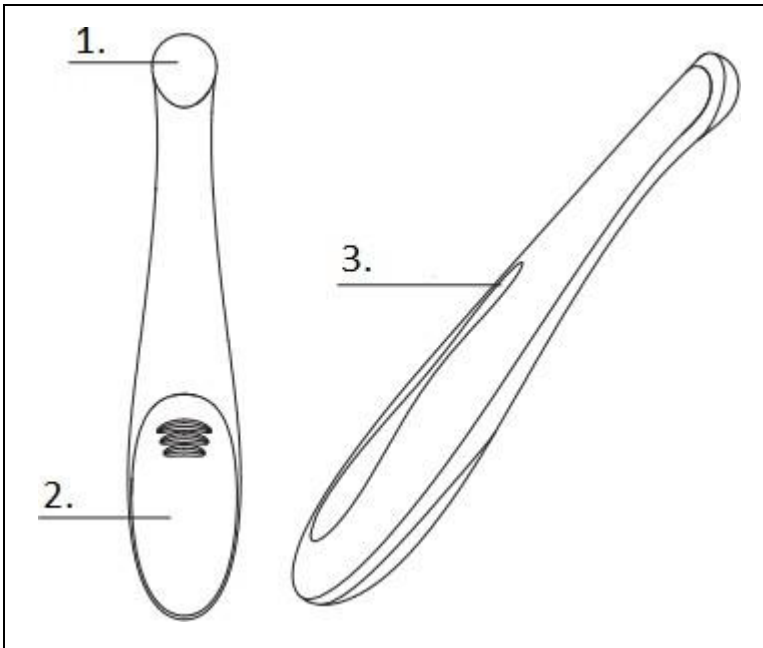	1.	Cap metalic pentru masaj
	2.	Baterii
	3.	Placa metalica

UTILIZARE




Aplicati suficienta crema de ochi uniform in jurul ochilor.

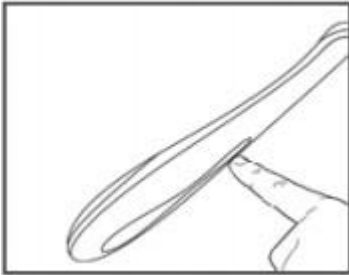

Atingeti placa metalica si puneti capul de masaj pe piele. Aparatul incepe sa vibreze.



Miscati capul de masaj in modul prezentat in imagini.

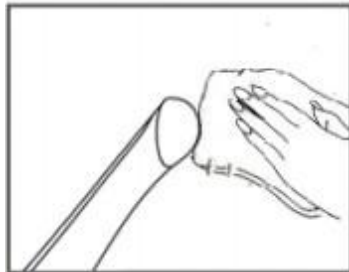

Dupa utilizare, tineti apasat comutatorul pentru a-l opri si curatati capul cu un prosop uscat sau un servetel.

MENTENANTA

- Aplicati crema pe fata uniform si intr-o cantitate corespunzatoare pentru ca aceasta sa nu se aseze excesiv pe capul de masaj. Dupa utilizare, curatati capul cu un prosop uscat sau un servetel.
- Protejati corpul aparatului de contactul cu apa.
- Nu utilizati agenti de curatare agresivi.
- Depozitati intr-un spatiu uscat si ferit de lumina.
- Nu folositi produsul daca este deteriorat.
- Protejati produsul de socuri si cazaturi.

ALIMENTARE

- • Daca bateria este descarcata, opriti dispozitivul si inlocuiti bateria.

- •Daca intentionati sa depozitati dispozitivul pentru o perioada lunga de timp, scoateti bateria.

SPECIFICATII

Denumire:	Aparat masaj ochi		
Model:	IF-1207	Greutate:	23 g
Material:	ABS	Dimensiuni:	138x27x19,6 mm
Frecventa vibratii:	12 000 RPM	Temperatura:	42 °C
Sursa alimentare:	1x AAA baterie	Tensiune	1,5 V
Tensiune:	350 mA	Sursa alimenare:	0,7 W

PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

Dupa expirarea duratei de utilizare a produsului sau daca o posibila reparatie nu este economica, eliminati-l in conformitate cu legile locale și ecologice, in cel mai apropiat centru de colectare. Prin eliminarea corespunzatoare, veti proteja mediul si resursele naturale. In plus, puteti ajuta la protejarea sanatatii umane.

Daca nu sunteti sigur de eliminarea corecta, cereti indrumari de la autoritatile locale, pentru evitarea incalcarii legii si a sanctiunilor.

Nu aruncati bateriile printre deseurile menajere, ci duceti-le in spatii destinate reciclarii.